



TRATAMENTO — DA DOR —



SURGICOL

PREMIUM **GOLD BLOCK**

Cânulas ecogênicas de bloqueio,
estimulação e com grove sonovisível

REGISTRO ANVISA: 81471639003



Apresentação e Tamanhos:

1 Injetor Graduado Ergonômico 12ml

2 Cânulas de Bloqueio e Estímulo com Grove Sonovisível 1 Manifold para Distribuição de 3 vias

1 X-Tape Tela Adesiva Radiopaca com 196 nichos 1 Luer Duplo

Medidas das Cânulas: 50 x 21G, 100 x 21G e 150 x 21G Tamanho X-Tape: 15 x 15 cm

Distância da linha: 1 cm





SURGICOL


PREMIUM GOLD BLOCK

Cânulas ecogênicas de bloqueio,
estimulação e com grove sonovisível

REGISTRO ANVISA: 81471639003

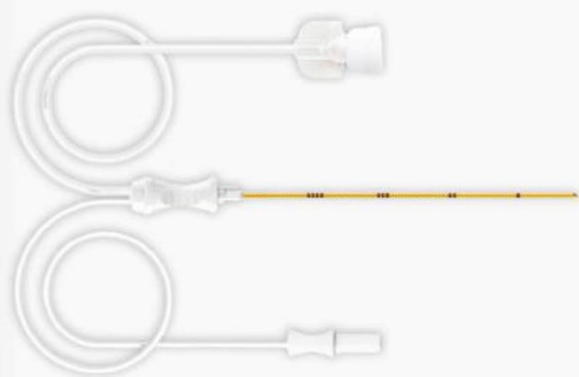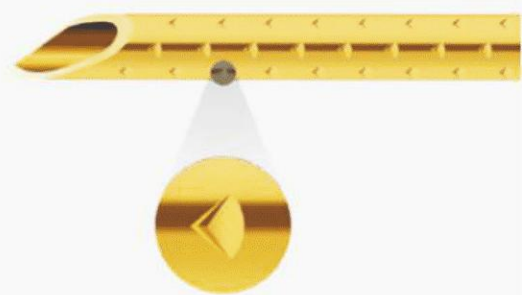

Cânulas de Bloqueio e Estímulo com Grove Sonovisível

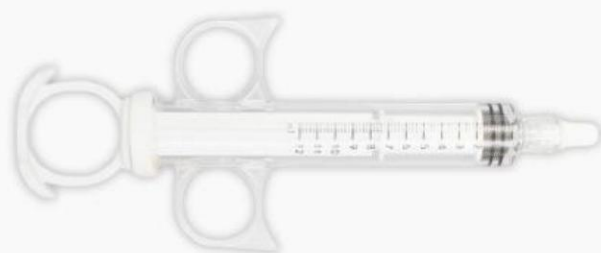


Injetor Graduado Ergonômico 12ml



Luer Duplo



Manifold

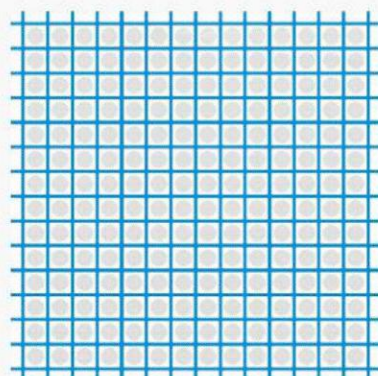

X-Tape Tela Adesiva Radiopaca

Tela adesiva X-Tape radiopaco, localização e posicionamento rápido, com significativa redução no tempo de procedimento e com menor tempo de exposição à radiação. 196 nichos de localização, permite maiores áreas.

Cânula de estimulação, para bloqueios simultâneos de nervos periféricos, graduadas e revestidas em teflon, possibilitando serem guiadas por ultrassom.

Grove Sonovisível, permite a fácil visualização da Ponta ecogênica em formato bisel através do ultrassom ou fluoroscopia, menos traumática na inserção da cânula e menor dor residual do procedimento.

Cânula graduada permite confirmação visual da profundidade do acesso.

Luer Duplo: Injeção bilateral simultânea.

Material de uso único, estéril.



SURGICOL



SURGICOL

Telefone/ Plantão 24h: 11 **4121-7004**

Rua Tiradentes, 75, 6º andar, Centro - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09780-000

 | surgicol.com.br

 | [surgicol](https://www.instagram.com/surgicol)

 | [surgicol-importacao-e-exportacao](https://www.linkedin.com/company/surgicol-importacao-e-exportacao)